



PAD (vaschetta raccogli-condensa)

Operazione di caricamento:

Il caricamento del contenitore portatile è un'operazione che può durare circa 1,5 min (un minuto e mezzo).

Indicatore di flusso


Cinghia

Connettore di uscita

Levetta valvola caricamento

Ricarica del portatile dall'unità base

Posizionare sullo 0 la manopola del flusso

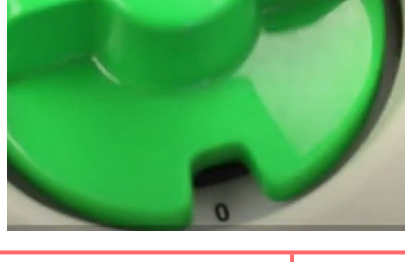

Con un panno asciutto, che non rilasci fili, puliano le connessioni e gli innesti.



Se presente, togliere il tappo antipolvere che copre l'innesto di caricamento. Allontanare la cinghia nera del contenitore portatile dagli innesti di riempimento per evitare interferenze.



Avvicinare il contenitore portatile all'unità base, tenendolo sempre in posizione verticale, fin non a far combaciare gli innesti posti sul fondo del contenitore portatile con quello posto sulla calotta del contenitore base. L'innesto della valvola sottostante il portatile deve essere perfettamente collegato con la valvola dell'unità base



Collegamento



AGGANCIO
Al fine di stabilizzare il contenitore portatile, tenerlo premuto verso il basso (Se è un portatile HVM ruotarlo fino a battuta contro la calotta del contenitore base, se è un Companion la base del portatile coincide esattamente con l'incavo che c'è sulla base stazionaria)



Levetta tipo A



Levetta tipo B

Esercitare pressione con una mano sull'unità portatile e con l'altra aprire la valvola di caricamento, tirando la levetta verso l'alto in posizione verticale; inizia così il travaso di ossigeno liquido che si manifesta con la fuoriuscita di ossigeno dalle fessure della calotta del contenitore base.




Continuare a tenere premuto verso il basso il contenitore portatile e tenere sollevata la leva di caricamento per 25 secondi e chiuderla. Ripetere questa attività fino al completo caricamento del contenitore portatile. Tale processo evita la formazione di residui di ghiaccio sugli innesti

Durante il passaggio sarà udibile un rumore che indica il passaggio dell'ossigeno



Quando l'unità portatile sarà piena l'ossigeno non riuscirà a passare più e tenderà a fuoriuscire, per cui sarà visibile una nuvoletta bianca di vapore. Il completamento del caricamento del contenitore portatile si avverte con un cambiamento del rumore e dalla maggiore densità di fuoriuscita dell'ossigeno.

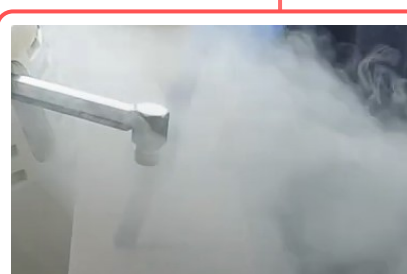


Quando la nuvoletta di vapore è abbondante e il rumore diventa cupo il portatile è pieno



Chiudere la valvola di caricamento attraverso la levetta e attendere almeno 10 secondi prima di scollegare il contenitore portatile



Tenere sollevato il contenitore portatile verso l'alto, utilizzando la cinghia nera a tracolla, e premere il pulsante di sgancio posto sul contenitore base.

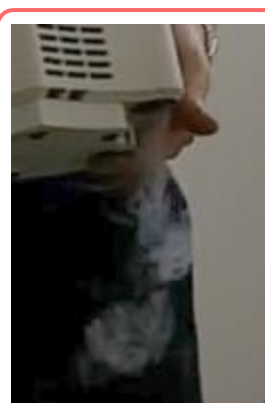

Per qualche minuto può continuare ad uscire "fumo" dal portatile. Questo succede perché l'ossigeno è a bassissime temperature e congela la valvola di innesto. Questa, quindi, può rimanere per un po' aperta. Dopo qualche minuto si scongela, si chiude da sola e l'ossigeno non esce più.

La stessa cosa può accadere sulla valvola del contenitore base.



Formazione ghiaccio

Qualora le valvole non dovessero scongelarsi, bisogna attendere che il ghiaccio si sciolga con la temperatura ambiente. Qualora non dovesse succedere e continua ad esserci una perdita di ossigeno dal contenitore base non fare alcuna operazione e contattare il vettore per la sostituzione.

Arieggiare sempre gli ambienti.

Il paziente può utilizzare il portatile

In tutti i casi è necessario sempre controllare l'indicatore di livello per controllare eventuali consumi anomali dopo la fuoriuscita dell'O2.

Avvertenze da osservare prima di caricare il contenitore portatile:

Prima di caricare il contenitore portatile, assicurarsi che il livello di ossigeno residuo del contenitore base, sia necessariamente superiore al 25% della capacità totale.

Indicatore di livello a LED: deve essere acceso almeno un led di colore verde (dal primo led verde).

Indicatore di livello meccanico: il livello deve essere superiore a 1/4 (linea compresa tra 0 e 1/2).